

Sizi **HYPER PULSE TEKNOLOJİSİ** ile  
TANIŞMAYA DAVET EDİYORUZ...

# HYPER PULSE

**BUZ EPİLASYON ve  
CİLT ONARIM**  
Ünitesi

**1 Mükemmel Cihaz**  
**7 ŞAŞIRTICI**  
TEDAVİ

**20 DK.'da**  
**TÜM VÜCUT**

**ACISIZ BUZ EPİLASYON**

**AKNE, LEKE, VASKÜLER** Tedavi

Cilt **GENÇLEŞTİRME**

**3D YÜZ ŞEKİLLENDİRME**

**TIRNAK MANTARI** Tedavisi



**ÇAĞDAŞGROUP®**  
PROFESSIONAL BRANDS

# HYPERPULSE

SİZİ ULTRA HIZLI VE ACISIZ  
**BUZ EPİLASYON TEKNOLOJİSİ** ile  
TANIŞMAYA DAVET EDİYORUZ...

HYPER PULSE'U SEÇMENİZ İÇİN  
**5 PAHA BİÇİLMEZ NEDEN**

# HYPER PULSE'U EŞSİZ KILAN 5 TEKNOLOJİK NEDEN

## A.L.T TEKNOLOJİSİ 4-6 SEANSTA KESİN SONUÇ

Saniyede 5 atış ile kıl kökünü  
105° kadar ısıtırak kıl hücrelerini yok eder.

## ACISIZ EPİLASYON DÖNEMİ

Her cilt rengi ve kıl tipinde  
hiç acı hissettirmeyen üstün teknoloji.

## TÜM VÜCUT SADECE 20 DAKİKA

7,5 cm<sup>2</sup> geniş başlık tek sefer geçişli  
ütüleme sistemi ile ultra hızlı epilasyon!

## ANESTEZİ SEVİYESİNDE BUZ BAŞLIK

Işık atım sıklığı fark etmeksizin  
işlem boyunca güçlü soğutma teknolojisi!

## TÜM CİLT RENKLERİ & TÜM KIL TIPLERİ

Bronz/beyaz ve esmer tenlerde,  
sarı/kızıl ve kumral kıllarda güvenli!

## Günde 15 TAM VÜCUT MÜŞTERİSİ

20 dk'da biten tüm vücut işlemi ile kazancınızı 5'e KATLAR

## Personel giderini YARIYA İNDİRİR

Epilasyon süresini 1/5 azaltarak personel giderini en aza indirir.

## LEKE, MANTAR, AKNE ve VASKÜLER TEDAVİ




Epilasyona ek tedaviler sağlayarak katlanan bir kazanç getirir.

## %100 OLUMLU REFERANS

İlk yılında kullanan tüm salonlardan ve müşterilerden mükemmel geri dönüş

## ARIZA ÇIKARMAYAN MODÜLER TEKNOLOJİ

Dünyadaki en büyük lazer üreticisi; İsrail yapımı HYPER PULSE  
modüler yapısı ile arıza çıkarmaz ve uygun fiyatlı başlık değişim garantisi verir.

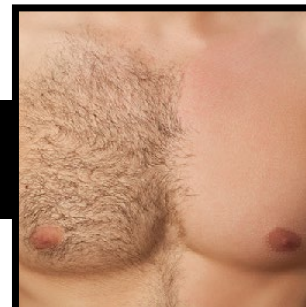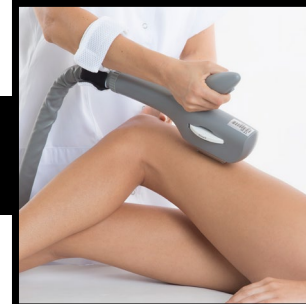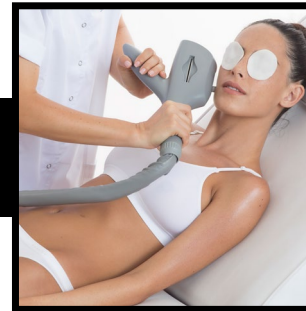

Tüm Kıl & Cilt Tipleri

Yaz - Kış GÜVENLİ UYGULAMA

Hızlı Ütüleme Sistemi

Saniyede 5 ATIŞ

4-6 Seansta Kesin Sonuç

105°'e kadar AKÜMÜLE ISI

Acısız Buz Devrimi

Anestezi Seviyesi BUZ BAŞLIK

**LEONARDO**  
bridging tech and beauty



# HYPER PULSE'U AVRUPA'DA 1 NUMARAYA TAŞIYAN

# 4 ÜSTÜN TEKNOLOJİ

## 1- SCANNER TEKNOLOJİSİ

Üçgen açıyla cilt altını tarayabilen HYPER PULSE SCANNER TEKNOLOJİSİ aynı bölgeyi 3 kez ısıtarak farklı seviyelerdeki **kıl köklerini tamamen yok eder.**



### PRE PULSE

Direk atış öncesi hazırlık ısısı

### DİRECT PULSE

Yüksek ısılı direk atış

### POST PULSE

Direk atış sonrası kontrol ısısı

## 2- A.L.T TEKNOLOJİSİ (AKÜMÜLE İSİ TEKNOLOJİSİ)

**Saniyede 5 atış** yapma özelliği ile ısıyı akümüle ederek yükselten HYPER PULSE doku hasarı ve yanık oluşturmadan kıl köklerini **105° C kadar ısıtarak** kıl kökünün tamamen yok olmasını sağlar.



## 3- BUZ BAŞLIK TEKNOLOJİSİ

**Anestezi Seviyesinde Buz Başlık Teknolojisi** ile cildi uyuşturarak işlemlerde **acıyı yok eder.**



## 4- ÜTÜLEME TEKNOLOJİSİ

Ütüleme sistemi ile **tüm vücut uygulamasını sadece 1 kere geçerek 20 dakikada** gerçekleştirir.



1 Kadının Ortalama Vücut Endeksi : 1,5m<sup>2</sup> Vücut Endeksi

7.5 cm<sup>2</sup> buz başlık ile  
**TAM VÜCUT 2000 Atış**  
ile tamamlanır

1.2 cm<sup>2</sup> diot ve alex  
başlıkları ile **TAM VÜCUT**  
**ANCAK 12.500 Atış** ile  
tamamlanabilir

HYPER PULSE bir tam vücut  
uygulama **20 DAKİKA'DA BİTER**

Diot ve alex ile bir tam vücut  
uygulama **2- 2,5 Saat SÜRER**

**HYPER PULSE  
HYBRİD TEKNOLOJİ**

**ALEX VE DİOTLAR**

## HYPER PULSE KAZANÇ TABLOSU

HYPER PULSE'un  
**5 tam vücut müşterisi**  
aldığı sürede,

HYPER PULSE  
kazancınızı tam  
**5 KAT ARTTIRIR.**

Alex ve Diotlar  
sadece **1 tam vücut**  
**müşterisi** alabilir.

**X5 MÜŞTERİ**  
**HYPER PULSE  
HYBRİD TEKNOLOJİ**

**X1 MÜŞTERİ**  
**ALEX VE DİOTLAR**

**400.000 = 2.500.000**  
HYPER PULSE ATIŞI = ALEX DİOT ATIŞI

**5 MÜŞTERİ = 1 MÜŞTERİ**  
**1 PERSONEL = 5 PERSONEL**

**SONUÇ**  
HYPER PULSE İŞLETMENİZİN  
**KAZANCINI 5'E KATLAR**

**HYPER PULSE  
HYBRİD TEKNOLOJİ**

**ALEX VE DİOTLAR**



# HYPER PULSE HYBRİD TEKNOLOJİSİNİ DİĞER CİHAZLARDAN AYIRAN ÖZELLİKLER

## HYPER PULSE HYBRİD TEKNOLOJİ

VS

## ALEXANDRITE & DIOT CİHAZLAR

1. HYPER PULSE **her cilt rengi ve her kıl tipinde** mükemmel sonuç verir.(Açık sarı kıllar dahil.)
  2. 7.5 cm<sup>2</sup>'lik başlık ile ultra hızlı ve güçlü epilasyon yapar.
  3. HYPER PULSE **bronz tende epilasyon yapabilir. Yaz kış uygulanabilir.**
  4. HYPER PULSE **doku altı hasarına yol açmaz.** Kalıcı yanıklara neden olmaz.
  5. HYPER PULSE **ter ve lenf bezlerine etki yaratmaz.**
  6. HYPER PULSE ütüleme sistemi ile **tüm vücut uygulamasını 20 dakikada** gerçekleştirir.
  7. HYPER PULSE ÜTÜLEME TEKNOLOJİSİ ile **sadece 1 kere geçilmesi yeterlidir.**
  8. HYPER PULSE **A.L.T TEKNOLOJİ saniyede 5 atış** yapma özelliği ile kıl köklerini **105° C kadar ısıtarak** kıl kökünün tamamen yok olmasını sağlar.
  9. HYPER PULSE **100 DK.'da 5 İŞLEM** gerçekleştirir.
  10. HYPER PULSE **Anestezi Seviyesinde Buz Başlık Teknolojisi** ile cildi uyuşturarak işlemlerde **acıyı yok eder.**
  11. HYPER PULSE'da **400.000lik atış alex ve diotlarda 2.500.000'a** eşdeğerdır. Başlık maliyeti 1/3 oranlarında azdır.
1. Alex ve diotlar sadece **koyu ve kumral kılları tespit ederek işlem yapar.**
  2. Alex ve diotlarda 1.2 cm<sup>2</sup>'lik başlık ebatı yüzünden uygulama süresi uzundur.
  3. Alex ve diotlar **bronz tenlerde işlem yapamaz** beyaz ten siyah kıl felsefesiyle çalışır. Sadece kış aylarında çalışır.
  4. Alex ve diotlar lazer işlemleri sırasında **doku altı hasarlarına** yol açabilir.
  5. Alex ve diotlar terleme dengesizliği yaratabilir.
  6. Alex ve diot makineleri **tüm vücut** uygulamalarını yaklaşık **2- 2,5 saatte** tamamlar.
  7. SHR ütüleme sistemi cihazlarda **1 noktadan 5-10 kere** geçilmesi gerekir. Süre uzar başlık maliyeti yükselir
  8. Alex ve diotlar düşük ısıda sonuç vermez. Yüksek ısıda ise **kalıcı yanıklara neden olur.**
  9. Alex ve diotlar **100 DK.'da yarım vücut işlemi** gerçekleştirir.
  10. Alex ve diotlarla epilasyon acıdır, hasta konforu düşüktür.
  11. Alex ve diotlarla yedek parça ve başlık giderleri kar oranını düşürür.



**LEONARDO**  
bridging tech and beauty

**HYPER  
PULSE**

**CİLT TEDAVİLERİ VE  
AMELİYATSIZ YÜZ GERME  
PROTOKOLLERİ**





## CİLT GENÇLEŞTİRME & GERDİRME




Cilt gençleştirme ifadesinin anlamı cildin epidermal katmanlarının yenilenmesi ve böylece cildin daha pürüzsüz hale getirilerek kırışıklıkların azalması ve ortadan kaldırılmasıdır. Ciltteki büyümüş gözeneklerin iyileştirilmesinin yanı sıra, pigmentasyon, koyu lekeler ve yüz bölgesindeki belirgin kan damarlarının aydınlatılması da söz konusudur.

HYBRİD TEKNOLOJİ ışığı fototermik cilt ısıtması sağlar. Sıtma, kolajen liflerinin yenilenme ve yeniden yapılandırılması için uyarır. Dolan ve görünmez hale gelen kırışıklıklar, yüz derisinin, boyunun, boyun çizgisinin ve gözlerin etrafında cerrahi müdahale veya enjeksiyon yapılmaksızın gerilme sağlar.

HYBRİD TEKNOLOJİ cilt gençleştirme tedavileri, yüksek başarı yüzdelerine sahiptir, invaziv değildir ve risk veya rahatsızlık oluşturmaz. Daha ilk seanstan sonuç alınmaya başlanır.

Tedavi kadınlar, erkekler ve tüm cilt tipleri için uygundur ve göz çevresi, boyun, dekolte bölgesi gibi bölgeleri ayrı ayrı tedavi etmek mümkündür. Hyper Pulse yüz dokusunu tedavi eder ve cilt katmanındaki kolajeni yenileyerek ciddi miktarda bir sıkılaştırma sağlar.

## AKNE VULGARIS / AKNE PROTOKOLÜ

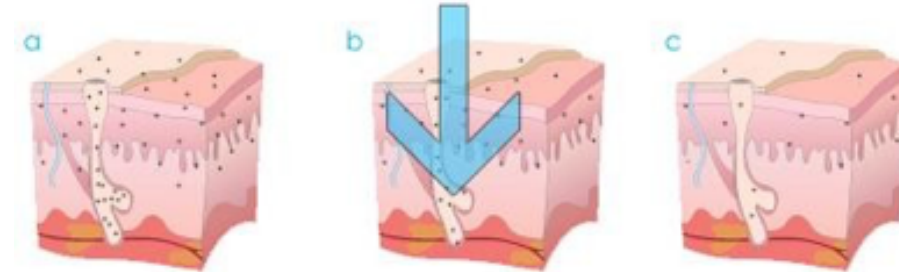


Yağlı cilt ve beraberinde gelen iltahapları etkili bir şekilde tedavi etmek için  
**HYPER PULSE!**

**HYBRİD TEKNOLOJİ akne lezyonlarının tedavi edilmesine ve önlenmesine yardımcı olur:**

- A - Epidermis katmanına nüfuz eden akne bakterileri, saç folikülü ve meme bezi
- B - Beam in length 480 nm (filtre) uzunluğunda HYBRİD TEKNOLOJİ huzmesi dermis katmanına kadar nüfuz eder ve bütün organellerin üzerine ışık saçar
- C - Tedaviden sonra bakteri miktarı ciddi derecede azalır, bir iltihap remisyonu ve engellem işlemi uygun HYBRİD TEKNOLOJİ devamlı olarak dermis ve epidermis katmanlarını tedavi eder.


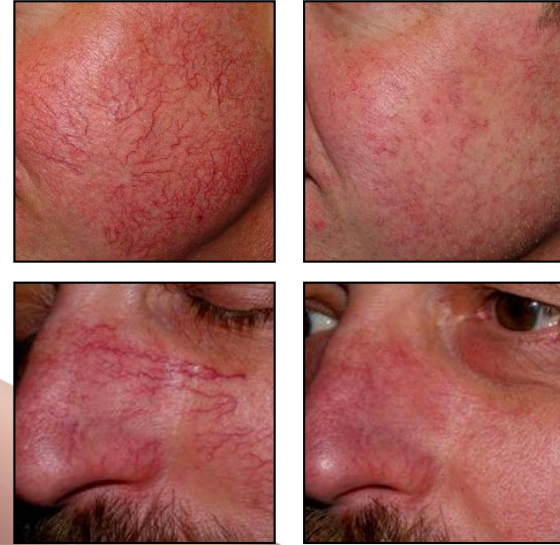


**VASKÜLER  
TEDAVİ**

Kuperoz cilt, kırmızımsı bir görüntü oluşturan genişlemiş kılcal damarların ortaya çıkmasıyla gerçekleşen olağan bir dermatolojik problemdir. Hamilelik, doğum, stres, kan basıncı ve kardiyovasküler hastalıklar gibi hormonal, zihinsel ve sağlık ile ilgili unsurları da vardır. Bunlardan bazıları kılcal damarların ortaya çıkmasına tolerans gösterebilir, fakat konu ince, hassas ve narin ciltlere gelince sonuçlar görülür hale gelir ve tıbbi müdahale gerektirir.

HYBRİD TEKNOLOJİSİNİ kullanarak kılcal damarları tedavi etmek ışık huzmesi kılcal damarlardaki pigmentleri domine eder, bu pigmentler kılcal damarlardaki hemoglobinin bileşenleridir. Işık huzmesi ile temas haline gelindiğinde hemoglobinin ısınır ve pıhtılaşır, kılcal damarlardaki akış durur ve bir absorpsiyon prosesine girip kaybolurlar. HYBRİD TEKNOLOJİSİNİ kullanıp damar tedavisi gerçekleştirmek güvenlidir ve risk, acı, herhangi bir yan etki içermez ya da aşırı kızarıklığa sebep olmaz.

Aynı zamanda, cildi rahatlatan ve cildin hipersensitivitesini önlemek için epidermis ve dermis katmanını kalınlaştıran ürünlerin kullanılması tavsiye edilir.

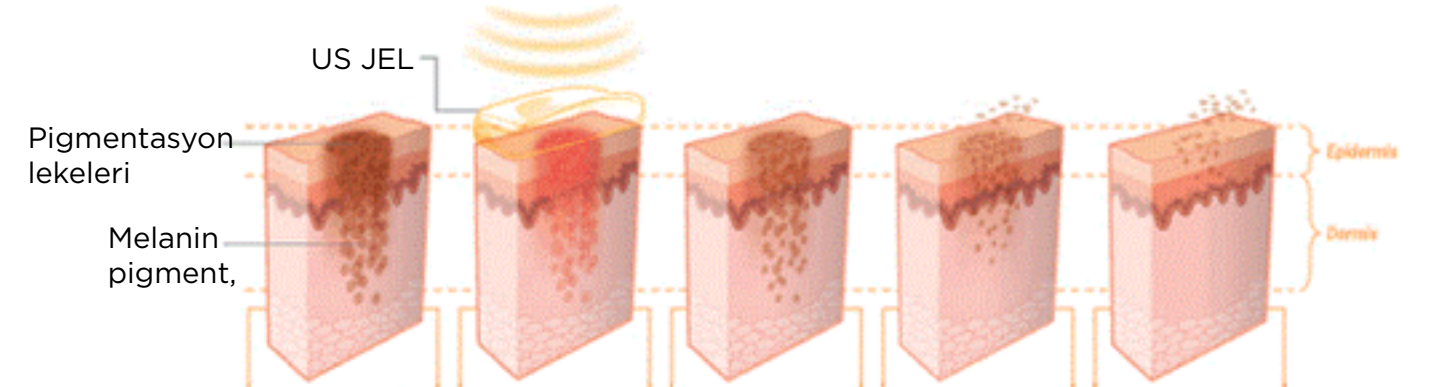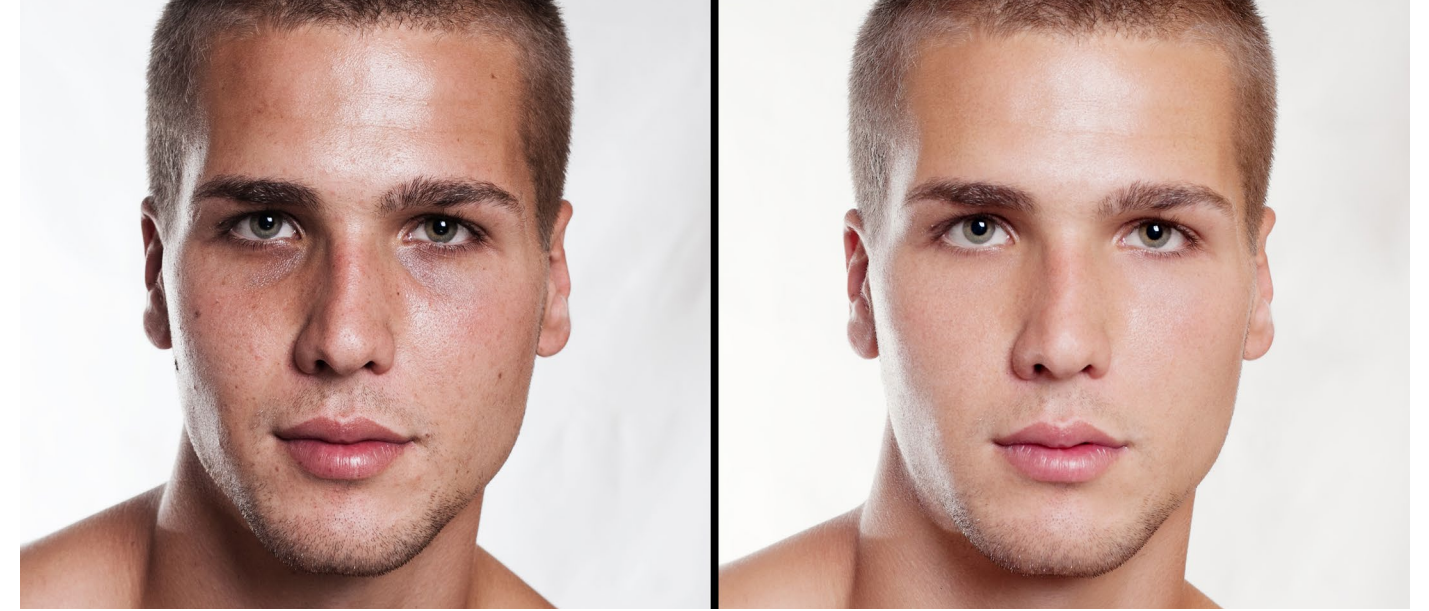**PİGMENTASYON TEDAVİSİ**

Cihazı dağıtan ışık derinin derin katmanlarına nüfuz eder. Melanosit (melanin pigmenti) ısıtma nedeniyle parçalanır, melanin küçük parçalara ayrılır ve melanin içeren hücreler yok edilir. Temizleme işlemi melanin partikülleri ve selüloz atıklarının bağışıklık sistemi (lenfatik sistem) yoluyla vücuttan atılmasıyla gerçekleşir. Cildin üst katmanlarındaki ana lekeler cildin yenilenmesi işlemi ile uzaklaştırılır ve üst katmanlar soyulur. Melanin hasarına ve kaybolmasına ilaveten, ışık demeti cilt hücrelerini oluşturan (Cilt yenileme süreci) protein olan kollajen üretimini uyarır, cilt metabolizmasını hızlandırır ve hasar görmüş hücrelerin onarımına teşvik eder.



## TIRNAK MANTARI TEDAVİSİ



- Genellikle dermatofitler, maya ve küf sebebiyle oluşan Mantar hastalığı
- En çok karşılaşılan tipi Tinea Unguim
- HYBRİD TEKNOLOJİ, mantarı oluşturan molekülleri yok eden bir termal enerji oluşturur (tam pıhtılaşma).
- Isı, hasar görmüş dokuyu sağlıklı dokulara zarar vermeden yok eder.
- Bu tedavinin kullanımı güvenlidir ve hiçbir risk taşımaz, doktorlar tarafından şiddetle tavsiye edilir ve hastaya sadece düşük bir seviyede rahatsızlık verir.



## HYPER PULSE PROTOKOLLERİ UYGULAMA TABLOSU

Program	Uygulama Tipi	Uygulama Şekli	Önerilen Değerler	Uyarılar
ALT 1	<b>3X530</b> Cilt Yenileme Gençleştirme	<b>3X530</b> <b>3 defa geçilir</b> Soğutucu kapalı (warm) Cilt Tipi Seç Lekeli bölge 5 kez HPC Gücü: 150 - 350	6 seans paket 2 haftada 1 kez	Tedaviye başlamadan önce derin temizleme + mekanik soyma (ilk uygulamadan yaklaşık bir hafta önce) yapılması önerilir. Vasküler ve hassas cilde özel dikkat edilmesi gerekmektedir. Hassas ciltte peeling (abrasion) sonrası başlanabilir.
ALT 2	<b>3X690</b> 3 defa geçilir Yüz Germe	<b>3X690</b> Soğutucu kapalı (warm) Cilt Tipi Seç HPC Gücü: 200 -400	6 seans paket 2 haftada 1 kez	İlk uygulamadan bir hafta önce derin bir temizlik + mekanik soyma yapılması önerilir). Aynı zamanda cilt yenileme tedavisi ile birlikte yapılabilir! Vasküler ve hassas cilde özel dikkat edilmesi gerekmektedir. Cilt yenileme sonrası önerilir. Tek başına önerilmez.
COMBI 1+2	<b>3X530</b> <b>3X690</b>	Yukarıdaki değerler ile	uygulama süresi 50 dakika	KOMBİNASYON cilt gençleştirme + yüz Germe ile birlikte
ALT 3	<b>6X590</b> Leke Onarımı	<b>6X590</b> <b>6 defa geçilir</b> Soğutucu kapalı (warm) Cilt Tipi Seç HPC Gücü: 250 - 350-800 (Koyu cilt için)	6 seans paket 2 haftada 1 kez	Tedavi, kontrollü yanmalara ve pigmentasyonun soyulmasına neden olabilir. * çok koyu tonuna sahip cilde özel referans ve dikkat ışık orta ila maksimum sıcaklığa ayarlanmalıdır. Yanma seviyesine yaklaşmayın.! Tedavi öncesi ve sırasında yaklaşık peeling yada abrasion sonrası kullanılabilir
ALT 4	<b>3X480</b> Akne Kürü	<b>3X480</b> Soğuk Çalışma (cold) Cilt Tipi Seç HPC Gücü: 150 - 350	3 kez geçilir akneli bölgelerde 2 defa daha geçilir	Özelleştirilmiş bir akne control ürünü eklenmesi önerilir.
ALT 5	<b>530</b> Kılcal damarlar	Sorunlu bölge için Soğutucu kapalı (warm) Cilt Tipi Seç HPC Gücü: 250 - 550	Önerilen seans sayısı 6, Damarlar kahverengi olana kadar yapılır	Bu tedavi diğer HYBRİD TEKNOLOJİSİ ile kombine edilmemelidir. Maruz kalmış nipellerin (yanıklar gibi) ile bir reaksiyon elde edilmelidir. Koyu ten için, orta ila maksimum seviyede soğutucu olabilir.
ALT 6	<b>530</b> Mantar Kürü	Sıcak Çalışma (warm) HPC Gücü: 350	30 atış Önerilen 18 seans 2 haftada bir. Her yüz atışta hasta dinlendirilir	Bir ultrason jeli ile atış yapılır mantar ilaçları ile tedaviyi birleştirmeniz önerilir.

# HYPERPULSE

**20 DK.'da**  
**TÜM VÜCUT**  
**ACISIZ**  
**BUZ EPİLASYON**



**ÇAĞDAŞGROUP®**  
PROFESSIONAL BRANDS

*Kliniğinizin ihtiyacı olan herşey...*

[www.cagdasgroups.com](http://www.cagdasgroups.com)  
[info@cagdasgroups.com](mailto:info@cagdasgroups.com)